

Información Para Pedidos

ANTERIORES	Torq.	Ang.	O/D	No. de las Partes
♦ Superiores 3-3 Universal	+55°	0°	0°	369-2102
♦ Superiores 3-3 Universal, con gancho	+55°	0°	0°	369-3102
♦ Superiores 3-3 Universal	+40°	0°	0°	369-2110
♦ Superiores 3-3 Universal, con gancho	+40°	0°	0°	369-3110

BICÚSPIDES	Torq.	Ang.	O/D	No. de las Partes
Superior/Inferior 4 y 5 Universal	+11°	0°	0°	369-2400
Superior/Inferior 4 y 5 Universal, con gancho	+11°	0°	0°	369-3400
Superior/Inferior 4 y 5 Universal	0°	0°	0°	369-2401
Superior/Inferior 4 y 5 Universal, con gancho	0°	0°	0°	369-3401

MOLARES	Torq.	Ang.	O/D	No. de las Partes
Superior 6D, con gancho	+10°	0°	+5°	369-3600
Superior 6I, con gancho	+10°	0°	+5°	369-3601
Superior 7D, con gancho	+10°	0°	+5°	369-3700
Superior 7I, con gancho	+10°	0°	+5°	369-3701
Inferior 6D, con gancho	0°	0°	0°	369-3610
Inferior 6I, con gancho	0°	0°	0°	369-3611
Inferior 7D, con gancho	0°	0°	0°	369-3710
Inferior 7I, con gancho	0°	0°	0°	369-3711

KITS PARA UN SOLO PACIENTE	No. de las Partes
Con Extracciones Superior e Inferior 7-7	740-0411
Superior e Inferior 7-7	740-0412
Sólo Superior 7-7	740-0414
Sólo Superior 7-7	740-0415
♦ Superior 3-3 únicamente	740-0416
♦ Superior e Inferior 3-3	740-0417

ARCOS - PAQUETES DE 10	No. de las Partes
Nivelación 1	
♦ Cobre Ni-Ti .013 (Barra Recta de 8.5")	260-1360
♦ Cobre Ni-Ti Preformado .013 (STb Social 6)	205-1950

Nivelación 2	
♦ .016 Ni-Ti-Superior Tamaño 1	205-0025
♦ .016 Ni-Ti-Superior Tamaño 2	205-0023
♦ .016 Ni-Ti-Superior Tamaño 3	205-0021
♦ .016 Ni-Ti-Inferior Tamaño 1	205-0031
♦ .016 Ni-Ti-Inferior Tamaño 2	205-0029
♦ .016 Ni-Ti-Inferior Tamaño 3	205-0027

Finalización	
♦ .016 TMA	202-0025
.0175 x .0175 TMA	202-0018
.017 x .025 TMA	202-0020

EDUCACIÓN DE PACIENTES/MERCADEO	No. de las Partes
Tipodonto STb Lingual	717-1040
Folleto para Pacientes STb Social 6, Inglés (Paquete por 40)	070-5493
Folleto para Pacientes STb Social 6, Español (Paquete por 40)	070-5494
Display POP STb Social 6, Inglés (soporte de folletos)	070-5495
Display POP STb Social 6, Español (soporte de folletos)	070-5496
Afiche STb Social 6, Inglés	070-5497*
Afiche STb Social 6, Español	070-5498*
DVD STb de Demostración	070-5555*

STb
Sistema Lingual Ligero



♦ Los Doctores que utilizan STb Social 6 solo ordenarán los productos resaltados

ORMCO
Estados Unidos y Canadá
Llame al: 800.854.1741
ó 714.516.7400
www.ormco.com

Europa
Llame al: 31 (0) 33.453.61 61
ó 00800 3032 3032
www.ormcoeuropa.com

AOA LAB
Estados Unidos y Canadá
Llame al: 800.262.5221
ó 262.886.1050
www.aolab.com

Ormco
SYBRON DENTAL SPECIALTIES
Ormco Corporation
1717 West Collins Avenue
Orange, CA 92867

070-5600 Rev.A

STbTM
Sistema Lingual Ligero



TRATAMIENTO INVISIBLE. CONTROL 3-D. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS.

Mientras el tratamiento con alineadores removibles es atractivo para muchos pacientes que desean una "solución invisible," muchos casos requieren altos niveles de control que solo los aparatos fijos pueden brindar. Con el Sistema STb Lingual Ligero, no se preocupará por los pacientes que se retiran y/o pierden sus aparatos, interrumpiendo el tratamiento.

El Sistema STb combina el máximo control y completa invisibilidad, siendo la solución estética ideal para usted y sus pacientes. Calidad, eficiencia, simplicidad y comodidad excepcional. Puede tenerlo todo con el Sistema STb.

- ♦ Máxima comodidad del paciente con impacto mínimo en el habla
- ♦ Mecánicas de baja fuerza, baja fricción para un movimiento dental más rápido
- ♦ Procedimientos de laboratorio simplificados
- ♦ Resultados predecibles de alta calidad

SISTEMA STb COMPLETO (7 a 7)

Tiempo de Tratamiento: 8 semanas



Tiempo de Tratamiento: 6 meses



STb SOCIAL 6 (3 a 3)

Tiempo de Tratamiento: 6 semanas



Tiempo de Tratamiento: 8 semanas



Una nueva Mirada Hacia Lingual.

Aún para el más inexperto en técnica lingual, la avanzada tecnología del Sistema STb Lingual Ligerero hace que el tratamiento lingual se fascinantemente fácil de utilizar y más efectivo que nunca.



Desarrollado por los Drs. Giuseppe Scuzzo y Kuoto Takemoto, el aparato STb es pequeño, cómodo y eficiente. El sistema está diseñado para usar fuerzas ligeras, brindar excelente control 3-D y eliminar la necesidad de colaboración del paciente.


El Sistema STb Lingual Ligerero es ideal para casos 7 a 7, mientras que el STb Social 6™ corrige apiñamiento anterior de leve a moderado o espaciamiento, en pocos meses.

Mejoras del Bracket STb

- ♦ La ranura de ligado facilita un sistema más pasivo en arcos de mayor diámetro
- ♦ Todos los brackets presentan un gancho (opcionales en anteriores y bicúspides)
- ♦ Anteriores- diseño con una sola aleta de ligado en el borde incisal que brinda mayor comodidad al paciente; base con offset gingival que permite una cementación más incisal del bracket
- ♦ Bicúspides- aleta más ancha para un mejor control rotacional y comodidad del paciente
- ♦ Primeros molares - ahora es un tubo, para mayor comodidad del paciente (univesal superior/inferior)



La reducción del perfil y los contornos redondeados del bracket STb minimizan la incomodidad de la lengua y las dificultades de pronunciación.

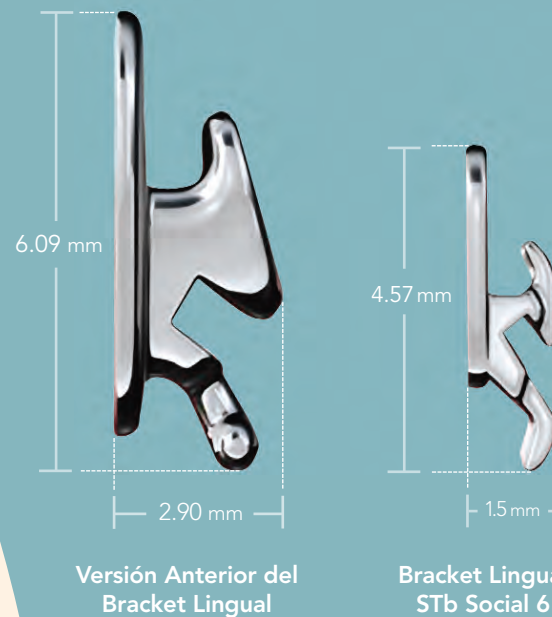

La Verdadera Alternativa de Alineador Invisible



- ♦ Trata apiñamiento anterior de leve a moderado y espaciamiento, con control máximo
- ♦ Los casos se finalizan entre 6 semanas y 4 meses
- ♦ Una secuencia simple de dos arcos alinea y desapiña los dientes; la mayoría de los casos se terminan con un solo arco
- ♦ La cementación indirecta a través de AOA lab hace una cementación rápida, simple y precisa - con un costo 80% menor al de un caso completo con alineadores removibles

Calidad

- ♦ Trate una gran variedad de casos con máximo control 3-D, con resultados óptimos
- ♦ Prediga con confianza los tiempos de tratamiento
- ♦ Elimine los problemas de colaboración y los alineadores perdidos

Comodidad del Paciente

- ♦ Perfil bajo, 1.5mm y contornos redondeados para máxima comodidad
- ♦ Los pacientes hablan correctamente en unos pocos días
- ♦ Las mecánicas de fuerzas bajas están diseñadas para que el tratamiento sea más suave con los tejidos.

Eficiencia

- ♦ Diseño de ligado pasivo y arcos de fuerzas óptimas diseñados para reducir la fricción y acelerar el tratamiento.
- ♦ Bracket pequeño y delgado para reducir las interferencias oclusales y aumentar la distancia interbracket para fuerzas más ligeras.
- ♦ La base del bracket se adhiere con seguridad a la superficie del diente.

Simplicidad

- ♦ Montaje estándar indirecto en su propia consulta o en el lab AOA hace que la cementación sea rápida, simple y precisa
- ♦ La mayoría de los casos no requieren de montaje TARG o CLASS, así que STb cuesta casi la mitad de los otros montajes linguales
- ♦ Fácil para que el doctor y sus asistentes lo aprendan y utilicen
- ♦ Disponible en kits para un solo paciente

Sin los problemas de colaboración y del control limitado de 3D de los alineadores, el Sistema STb brinda la estética y comodidad que sus pacientes adorarán y la facilidad clínica y los resultados que usted desea. Es lingual como usted nunca antes lo había visto.



Ranura de ligado pasivo en la parte superior del bracket que previene que la ligadura "agarre" el arco en el fondo de la ranura, reduciendo la fricción.



Los brackets STb se asientan en la superficie plana de los dientes, cerca del borde incisal, para facilitar el montaje del caso.

STbTM
Sistema Lingual Ligerero

